

Neonatología
Nutrición enteral



nutrisafe²
El sistema de
alimentación
enteral seguro
para neonatología.

Cumple con
ISO 80369-1

VYGON
Value Life

ISO 80369-3: 2016

Anexo E- LAS NECESIDADES DEL USUARIO


- "El volumen del desplazamiento al realizar una conexión es importante. En un recién nacido de 500 g, enteral. Los medicamentos se prescriben a menudo en volúmenes tan pequeños como 0,1 ml o incluso 0,01 ml ".⁽¹⁾

Anexo A - PREOCUPACIÓN

- "Se han expresado inquietudes acerca de los posibles riesgos de administrar dosis precisas de medicamentos en ciertas prácticas clínicas a través de subpoblaciones de alto riesgo (por ejemplo, pacientes neonatales) cuando se usa un sistema de conexión invertida (de hembra a macho). Esta orientación puede introducir un desplazamiento inadvertido de fluido ... "⁽¹⁾
- "Las pruebas de laboratorio también muestran que un par de conectores E1 [ENFit™] de tolerancia media en una orientación hembra a macho desplaza una media de 0.148 ml ... "⁽¹⁾

Para proporcionar el mejor cuidado y seguridad posible para los pacientes neonatales, Vygon continuará proporcionando el sistema Nutrisafe2, que es compatible con la norma ISO 80369-1.


En neonatología: SEGURO, PEQUEÑO Y PRECISO!

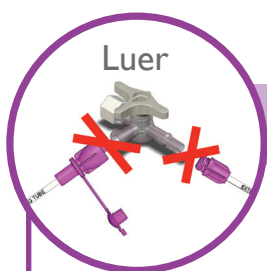

Luer

SEGURO...


Especialmente diseñado para pacientes neonatales, Nutrisafe2 es un sistema de alimentación enteral único y seguro, incompatible con Luer y otros conectores de pequeño calibre según los requisitos de la norma ISO 80369-1. El riesgo de desconexión se reduce al mínimo y aumenta la seguridad del paciente.

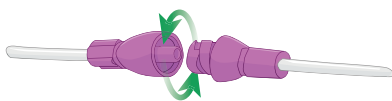


El sistema de cerradura proporciona una seguridad adicional. La desconexión accidental es prácticamente imposible, asegurando que se reciben los nutrientes valiosos.

(1) Extract of ISO 80369: 2016

...PEQUEÑO...

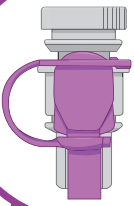

Gracias al diseño compacto de Nutrisafe2, el tamaño, el peso y el espacio muerto de los conectores se minimizan.

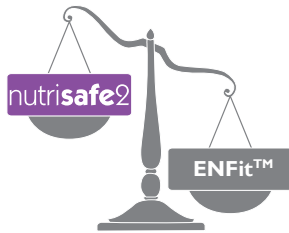

Por lo tanto, el desplazamiento de la sonda y el acodamiento se reducen.

Nutrisafe2® reduce el espacio muerto en un 70% comparado con ENFit™⁽²⁾

...y PRECISO

El diseño compacto de las conexiones de Nutrisafe2 garantiza el suministro preciso de pequeños volúmenes de medicamentos, especialmente para medicamentos críticos como la morfina, la digoxina, el citrato de cafeína, el hierro, la metadona, etc.

	nutrisafe2 (ISO 80369-1)	ENFit™ (ISO 80369-3)
Máximo exceso de suministro para una jeringa⁽²⁾	0.029ml	0.120ml⁽³⁾

⁽³⁾ Las pruebas de laboratorio han mostrado 0.148 ml de media contra ENFit, como se indica en ISO 80369-3: 2016



Ilustración de exceso de suministro debido a la conexión de la sonda de alimentación

(2) Theoretical measurements - January 2014 - Internal data

Sistema probado a nivel mundial

11 AÑOS DE EXPERIENCIA EN NEONATOLOGÍA!

- Creado en 2005, Nutrisafe2 es el primer sistema de nutrición enteral totalmente incompatible con Luer y especialmente diseñado para bebés prematuros.
- No se informó conexiones erróneas
- Clientes satisfechos de más de 30 países.

La solución completa para neonatos

Jeringas	0.5ml / 1ml / 2.5ml / 5ml / 10ml / 20ml / 35ml / 60 ml. También jeringas de color ámbar disponibles para protección UV: 1 ml / 2,5 ml / 5 ml / 10 ml
Sondas	Disponible en PVC, poliuretano y silicona en una variedad de longitudes y tamaños.
Prolongadores	Disponible en una variedad de longitudes y tamaños.
Cánula de extracción	Disponible en diferentes tamaños y tipos, para llenar jeringas con leche materna, fórmula o medicamento.
Accesorios	Tapones de ventilación para jeringa Conector en Y Conector macho-macho Tapones de viales para muestreo ...
Bomba de jeringa	Específicamente diseñada para la alimentación enteral. Esta bomba fácil de usar es capaz de realizar más de 6 horas de trabajo continuo y es compatible con todos los tipos de jeringas Nutrisafe2.



Marcas numéricas



Ahorro de volumen tapones de colores



Radiopaca

Para más información, escriba a comercial@vygon.es

Las especificaciones incluidas en este folleto son simplemente informativas y no implican, bajo ningún concepto, obligación contractual alguna.

Vygon España Calle Ciudad de Sevilla, 34 Polígono Fuente del Jarro 46988 PATERNA
Recepción: 902.876.288 Servicio de contabilidad: 961.344.364
Servicio de marketing: 961.344.745 Servicios comerciales: 902.876.288
Fax: 902.876.289


www.vygon.es